

**ZA ZDRAVE OČI
I JASAN VID**



**KATALOG KONTAKTNIH SOČIVA
I SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE
2012/2013**

MEKA KONTAKTNA SOČIVA

VODEĆEG SVETSKOG PROIZVOĐAČA:

Alcon[®]
a Novartis company

CIBA **VISION**[™]
A Vision Care Unit Of Alcon



SILIKON HIDROGEL KONTAKTNA SOČIVA ZA PLANIRANU ZAMENU

(SOČIVA „KOJA DIŠU“ – ZA ZDRAVIJE OČI)

Kiseonik je ključni faktor za zdravlje rožnjače. Ukoliko rožnjača nije u dovoljnoj meri snabdevena kiseonikom, javlja se hipoksija praćena nizom simptoma i tegoba, a zdravlje rožnjače i njena i normalna funkcija bivaju ugroženi.

Obična (hidrogel) kontaktna sočiva ponašaju se kao barijera snabdevanju kiseonika ka rožnjači. Ipak, kiseonik do nje dolazi na dva načina: kroz suzni film koji se „pumpa“ iza sočiva, kada se sočivo pomera usled treptanja i direktno kroz materijal sočiva.

Meka kontaktna sočiva (koja se mnogo manje pomeraju od tvrdih ili gas propusnih sočiva) imaju razmenu suza samo od 1% do 5%. Zbog toga nije dovoljno snabdevanje kiseonikom samo kroz suzni film, već je neophodna veća transmisija kiseonika i kroz samo sočivo. To znači da materijal sočiva mora imati visoku propusnost kiseonika, što se se ogleda kroz visok Dk faktor.

Nekada se smatralo da je sadržaj vode kontaktnog sočiva ključni faktor za zdravlje i udobnost kontaktnih sočiva. Međutim, razvoj nauke i tehnologije doprineo je da se danas zna da je za zdravlje rožnjače, prilikom nošenja kontaktnih sočiva, najvažnija propusnost kiseonika.

U želji da to postigne, kompanija CIBA VISION je, prva u svetu, napravila kontaktna sočiva od silikon hidrogel materijala i postavila standard koji se sada već uveliko primenjuje.

SILIKON HIDROGEL materijal kontaktnih sočiva ima značajno veći Dk, tj. propusnost kiseonika, u odnosu na hidrogel materijale.

Kompanija CIBA VISION je tvorac cele familije kontaktnih sočiva AIR OPTIX sa visokom propusnošću kiseonika napravljenih od silikon hidrogel materijala, kao i najzdravijeg kontaktnog sočiva na svetu (AIR OPTIX NIGHT&DAY), sa najvećim Dk faktorom ikada.



1. AIR OPTIX NIGHT&DAY AQUA



AIR OPTIX Night&Day Aqua predstavljaju unapređenu verziju kontaktnih sočiva AIR OPTIX Night&Day. Svi parametri su identični, a razlika je u tome što je dodat agens za vlaženje.

AIR OPTIX Night&Day Aqua sočiva se preporučuju svima, a naročito osobama koje žele da spavaju sa sočivima ili imaju potrebu da sočiva nose u kontinuitetu, do 30 dana i noći, kao i osobama sklonim hipoksiji. Koriste se i kao terapijska sočiva.

- **Sferna kontaktna sočiva**
- **Materijal: Fluoro Silikon hidrogel**
- **Dk: 175 x10⁻⁹**
- **AIR OPTIX Night&Day Aqua ima najveću propusnost kiseonika na svetu! (6 puta više od hidrogel kontaktnih sočiva)**
- Zbog izuzetno velike propusnosti kiseonika (Dk), AIR OPTIX Night&Day Aqua sočiva su jedina sočiva na svetu sertifikovana i za **TERAPEUTSKU primenu** (kod povreda oka, abrazije i erozije rožnjače, keratopatija, ulceracija rožnjače, kod sindroma suvog oka, nakon refrakcione hirurgije i drugo)
- Sadrže agens za vlaženje za postizanje savršenog komfora
- AIR OPTIX Night&Day Aqua sočiva su u procesu proizvodnje podvrgnuta i plazma tretmanu površine u cilju postizanja veće otpornosti na depozite, savršenog ugla kvašenja i još bolje biokompatibilnosti.
- Dijametar: 13,8 mm,
- Vlažnost (sadržaj vode): 24%
- Zamena: Mesečna
- Režimi nošenja:
 - Dnevno (ujutru postavljanje, a uveče skidanje) ili
 - Fleksibilno (povremeno nošenje i preko noći) ili
 - **PRODUŽENO** do 30 dana i noći bez skidanja
- Pakovanje: Kutija od 3 blistera (sočiva) ili kutija od 6 blistera (sočiva)
- Preporučena sredstva za održavanje: SOLOCARE AQUA ili AOSEPT PLUS
- Raspon raspoloživih parametara:



Bazna krivina	Dioptrija (D)	Raspon (korak) D
8,6 8,4	+6,00 do -10,00	+6,00 do -8,00 korak 0,25, preko -8,00 korak 0,50

2. AIR OPTIX AQUA (AS3 i AS6)



AIR OPTIX AQUA su kontaktna sočiva prvog izbora!

Preporučuju se svima, a naročito osobama sklonim hipoksiji.

Za zdravije oči, kristalno jasan vid i dugotrajni komfor

- **Sferna kontaktna sočiva**
- **Materijal: Silikon hidrogel**
- **Dk: 138 x10⁻⁹**
- **Propusnost kiseonika je 5 puta veća nego kod hidrogel sočiva**
- Dijametar: 14,2 mm
- Vlažnost (sadržaj vode): 33%
- Zamena: Mesečna
- **BIASFERIČNI dizajn (asferična i prednja i zadnja površina)** omogućuje bolji fit sočiva, izuzetno jasan vid i veći komfor
- Režimi nošenja: dnevno nošenje, ili **PRODUŽENO** do 6 dana i noći
- Blago obojena u plavo, radi lakšeg rukovanja
- Pakovanje: Kutija od 3 blistera (sočiva) ili kutija od 6 blistera (sočiva)
- Preporučena sredstva za održavanje: SOLOCARE AQUA ili AOSEPT PLUS
- Raspon raspoloživih parametara:




Bazna krivina	Dioptriya (D)	Raspon (korak) D
8,6	+6,00 do -8,00	0,25
	-8,00 do -10,00	0,50

- AIR OPTIX AQUA sadrže „**AQUA MOISTURE**“ **SISTEM** sa agensom za **vlaženje** koji vlaži, čuva i održava vlažnost sočiva tokom celog dana, obezbeđujući komfor pri postavljanju, komfor tokom celog dana i komfor na kraju dana, svaki dan
- Tretman površine plazmom obezbeđuje izuzetno kvašenje i otpornost na depozite
- Dobar ugao kvašenja (37°) obezbeđuje savršeno vlaženje



3. AIR OPTIX FOR ASTIGMATISM (AT3 i AT6)

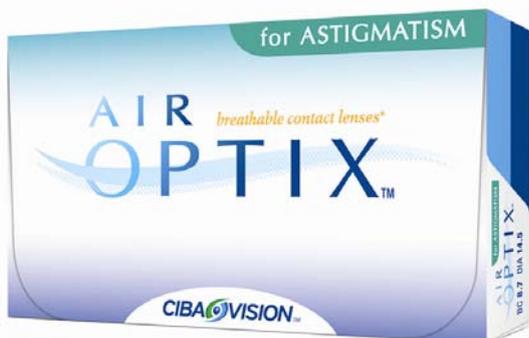

AIR OPTIX FOR ASTIGMATISM su torična kontaktna sočiva prvog izbora!

Preporučuju se svim pacijentima koji imaju astigmatizam, a naročito onima koji su skloni hipoksiji.

Za zdrave oči, kristalno jasan vid i dugotrajni komfor

- **Torična kontaktna sočiva**
- **Materijal: Silikon hidrogel**
- **Najveći Dk među svim toričnim sočivima! Dk: 110×10^{-9}**
- **Propusnost kiseonika je 5 puta veća nego kod hidrogel sočiva**
- Plazma tretman površine daje veliku otpornost na depozite
- Izuzetan komfor i savršen vid tokom celog dana
- Napredni "precision Balance 8/4" dizajn koji obezbeđuje izuzetnu stabilnost bez rotacije
- Markeri na 3, 6 i 9 sati
- Precizan, jednostavan i brz fitting
- Široka optička zona
- Dijametar: 14,5 mm
- Vlažnost (sadržaj vode): 33%
- Zamena: Mesečna
- Režimi nošenja: dnevno nošenje, ili **PRODUŽENO** do 6 dana i noći
- Pakovanje: Kutija od 3 blistera (sočiva) ili kutija od 6 blistera (sočiva)
- Preporučena sredstva za održavanje: SOLOCARE AQUA ili AOSEPT PLUS
- Raspon raspoloživih parametara:




Bazna krivina	Dioptrija sfere (D Sph)	Korak D Sph	Dioptrije cilindra (D Cyl)	Ose
8,70	+6,00 do -6,00	0,25	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25	0° do 180° na 10°
	-6,50 do -10,00	0,50	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25	0° do 180° na 10°





Silikon hidrogel kontaktna sočiva za presbiope

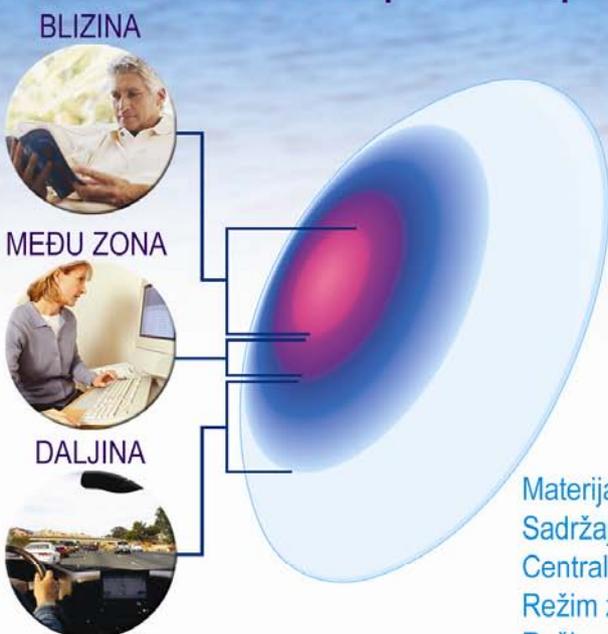

- 5 PUTA VIŠE KISEONIKA U ODNOSU NA POSTOJEĆA MULTIFOKALNA SOČIVA
- ZDRAVLJE OKA I UVEK JASAN VID
- "PRECISION TRANSITION" DIZAJN SA BLAGIM PRELAZIMA IZMEĐU ZONA
- ASFERIČNA ZADNJA POVRŠINA ZA OPTIMALNO CENTRIRANJE I FIT
- "AQUA MOISTURE" SISTEM VLAŽENJA ZA IZUZETAN KOMFOR
- PLAZMA TRETMAN POVRŠINE ZA MANJE DEPOZITA I VRHUNSKE PERFORMANSE

Materijal: silikon hidrogel: lotrafilcon B Dk/t: 138

Sadržaj vode: 33%

Centralna debljina: 0.08@-3.00D

Režim zamene: mesečno

Režim nošenja: dnevno ili produženo do 6 dana

Pakovanje: kutija sa 3 blistera

Boja: blago obojena u plavo, radi lakšeg rukovanja

Održavanje: SoloCare Aqua ili Aosept

Dijametar (mm): 14.2

Bazna krivina (mm): 8.6

Dioptriya sfere (D): od +6.00D do -10.00D, sa korakom 0.25D

Adicije: LO, MED, HI

(LO: Add \leq +1.25D; MED: Add od +1.50D do +2.00D; HI: Add od +2.25D do +2,50D)



UPUTSTVO ZA FITING

1. Izaberite inicijalno sočivo

- Odredite vertex korigovanu sfernu dioptriju na daljinu,
- Odredite adiciju za naočare,
- Izaberite inicijalnu adiciju (LO, MED ili HI) prema adiciji za naočare, iz Tabele 1.

2. Procenite fit probnog sočiva

- Ostavite sočiva da se stabilizuju 5 do 10 minuta,
- Dok se sočiva stabilizuju, povedite pacijenta iz ordinacije u realno okruženje. Zamolite pacijenta da pogleda u daljinu. Vid uvek proveravajte BINOKULARNO. Izvršite monokularnu i binokularnu over-refrakciju za daljinu (bez okluzije) koristeći rukom držana probna stakla i utvrdite koliko plus dioptrije pacijent prihvata na daljinu. Ciljajte na maksimalni plus koji daje jasan vid na daljinu.
- Ako over-refrakcija nije 0,00, pređite odmah na novo probno sočivo, a zadržite vrednost ADD.
- Proverite kvalitet vida na blizinu u realnom okruženju. Koristite predmete iz svakodnevnog života (knjigu, novine ili tekst na mobilnom telefonu).
- Ukoliko su vid na daljinu i vid na blizinu zadovoljavajući, prepisite sočiva

POBOLJŠANJE VIDA NA BLIZINU:

- Utvrdite koje oko prihvata veći plus (vidite korake A i B), postavljajući naizmenično preko levog i desnog oka probno staklo od +1,50 dok pacijent gleda u daljinu sa oba oka. Smatrajte da je nedominatno ono oko kod koga je pri binokularnom gledanju na daljinu vid manje mutan sa +1,50. Možete primeniti i neku drugu, Vama zgodniju, metodu za utvrđivanje nedominantnog oka.
- Proverite binokularnu oštrinu vida sa +0,50 preko nedominantnog oka, kako biste utvrdili da li se popravio vid na blizinu a da vid na daljinu i dalje bude zadovoljavajuć.

Korak A: Postavite novo probno sočivo sa istom ADD na nedominantno oko, podešavajući dioptriju na daljinu za 0,50. **Korak B:** Ukoliko vid na blizinu i dalje nije zadovoljavajuć, podesite ADD prema tabeli Korak B.

Poboljšanje vida na blizinu, Korak A			Poboljšanje vida na blizinu, Korak B		
ADD NAOČARA	DOMINANTNO OKO	NEDOMINANTNO OKO	ADD NAOČARA	DOMINANTNO OKO	NEDOMINANTNO OKO
Do +1,25	LO	LO sa dodatnih +0,50	Do +1,25	MED	MED
+1,50 do +2,00	MED	MED sa dodatnih +0,50	+1,50 do +2,00	MED	HI
+2,25 do +2,50	HI	HI sa dodatnih +0,50	+2,25 do +2,50	HI	MED

POBOLJŠANJE VIDA NA DALJINU:

- Ukoliko "over-refrakcija" za daljinu nije poboljšala oštrinu vida na daljinu, primenite Tabelu 2.

Tabela 2

ADD NAOČARA	DOMINANTNO OKO	NEDOMINANTNO OKO
+1,50 do +2,00	LO	MED
+2,25 do +2,50	HI	MED

Tabela 1

AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL IZBOR ADICIJE	
ADD NAOČARA	OBA OKA
Do +1,25	LO
+1,50 do +2,00	MED
+2,25 do +2,50	HI

HIDROGEL KONTAKTNA SOČIVA ZA PLANIRANU ZAMENU

1. DAILIES AQUA COMFORT PLUS

NOVO!

CIBA VISION
DAILIES
AquaComfort Plus™

TAJNA JE U TREPTAJU
NOVI DAILIES - POJAM ZA KOMFOR



- Osvežava oči 14000 puta dnevno
- Jedino sočivo sa trostrukim vlaženjem
- Za vrhunski komfor tokom celog dana

1. LUBRICIRA	2. VLAŽI	3. OSVEŽAVA
<p>HMPC (Hidroksipropil metilceluloza) kao aktivni lubrikant pruža komfor na početku dana</p>	<p>Hidrofilni agensi za vlaženje PEG (Polietilen glikol) i PVA (Polivinil alkohol) obezbeđuju vlažnost tokom celog dana</p>	<p>Osvežavajući agens za vlaženje PVA (Polivinil alkohol) aktivira se sa svakim treptajem i pruža komfor sve do kraja dana</p>

BAZNA KRIVINA: 8,7 mm

DIJAMETAR: 14,0 mm

SADRŽAJ VODE: 69%

REŽIM ZAMENE: DNEVNO

REŽIM NOŠENJA: DNEVNO

PAKOVANJE: 30 SOČIVA

Bazna krivina	Dioptriya (D)	Raspon (korak) D
8,7	+0,50 do +6,00	0,25
	-0,50 do -10,00	od -0,50 do -6,00 korak 0,25, preko -6,00 korak 0,50

2. DAILIES ALL DAY COMFORT (D30N)



- **Sferna kontaktna sočiva**
- Zamena: **Dnevna = svaki dan novi par sočiva.**
- Bez muke oko održavanja sočiva! Sa obzirom na režim zamene (ujutru se postavljaju, a uveče bacaju), nije potrebno održavanje sočiva
- Sadrže Aqua Comfort sistem za održavanje vlažnosti, koji pruža izuzetan komfor
- Režim nošenja: Dnevno.
- Dijametar: 13,8 mm
- Vlažnost: 69%
- Pakovanje: Kutija od 30 blistera (sočiva)
- DAILIES kontaktna sočiva mogu se nositi kao jedino očno pomagalo, a mogu se i kombinovati sa drugim očnim pomagalima. Na primer: naočare redovno, a DAILIES povremeno, pri bavljenju sportom, ili AIR OPTIX redovno, a DAILIES povremeno, za vreme godišnjeg odmora
- Raspon raspoloživih parametara:



Bazna krivina	Dioptriya (D)	Raspon (korak) D
8,6	+0,50 do +6,00	0,25
	-0,50 do -10,00	od -0,50 do -6,00 korak 0,25, preko -6,00 korak 0,50

3. DAILIES TORIC (DT30N)



Preporučuju se svim astigmatičnim pacijentima, a naročito mladim ili aktivnim ljudima. Posebno pogodna za nošenje tokom sporta, putovanja, izleta, godišnjih odmora... DAILIES TORIC sočiva nosi većina sportista sa astigmatizmom na svetu!

- **Torična kontaktna sočiva**
- Zamena: **Dnevna = svaki dan novi par sočiva.**
- Bez muke oko održavanja sočiva! (ujutru se postavljaju, a uveče bacaju),
- Sadrže Aqua Comfort sistem za održavanje vlažnosti i komfora
- Dijametar: 14,2 mm, Vlažnost: 69%
- Marker na 3 i 9 sati; Oznaka „OK“ kao indikator da sočivo nije izvrnuto
- Pakovanje: Kutija od 30 blistera (sočiva)
- Raspon raspoloživih parametara:

Bazna krivina	Dioptriya sfere (D Sph)	Korak	Dioptriya cilindra (D Cyl)	Osa
8,60	+4,00 do -6,00	0,25	-0,75 i -1.50	20°, 70°, 90°, 110°, 160° i 180°
	-6,00 do -8,00	0,50		

4. DAILIES PROGRESSIVES (DP30N)




Preporučuju se svim presbiopnim pacijentima, a naročito aktivnim osobama ili onima koji se bave sportom. Takođe pogodna za nošenje tokom putovanja, izleta, godišnjih odmora...

- **Multifokalna (progresivna) kontaktna sočiva**
- Zamena: **Dnevna = svaki dan novi par sočiva.**
- Bez muke oko održavanja sočiva! (ujutru se postavljaju, a uveče bacaju),
- Sadrže Aqua Comfort sistem za održavanje vlažnosti i komfora
- Dijametar: 13,8 mm, Vlažnost: 69%
- Pakovanje: Kutija od 30 blistera (sočiva)
- Raspon raspoloživih parametara:

Bazna krivina	Dioptriya sfere (D Sph)	Korak	Adicija (Add)
8,60	+5,00 do -6,00	0,25	do +3,00

5. FOCUS VISITINT MONTHLY (FOM)

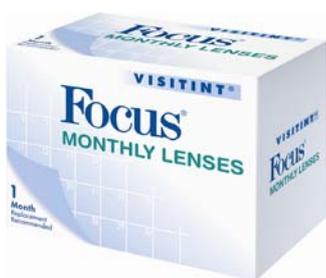

- **Sferna kontaktna sočiva**
- Zamena: **Mesečna**
- Režim: Dnevno nošenje (ujutru se postavljaju, a uveče skidaju)
- Dijametar: 14,0 mm, Vlažnost: 55%
- Boja: Blago obojena radi lakšeg rukovanja
- Pakovanje: Kutija od 6 blistera (sočiva)
- Preporuka za održavanje: SOLOCARE AQUA ili AOSEPT PLUS

! DOSTUPNA
DO KRAJA 2011.

Raspon raspoloživih parametara:

Bazne krivina	Dioptrija	Raspon D
8,6 8,9	+6,00 do -15,00	od +6,00 do -8,00 korak 0,25 preko -8,00 korak 0,50

6. FOCUS TORIC VISITINT (FTM)



- **Torična kontaktna sočiva**
- Zamena: **Mesečna**
- Režim: Dnevno nošenje (ujutru se postavljaju, a uveče skidaju)
- Dijametar: 14,5 mm, Vlažnost: 55%
- Boja: Blago obojena radi lakšeg rukovanja
- Pakovanje: Kutija od 6 blistera (sočiva)
- Preporuka za održavanje: SOLOCARE AQUA ili AOSEPT PLUS

! DOSTUPNA
DO KRAJA 2011.

Raspon raspoloživih parametara:

Bazna krivina	Dioptrija sfere (D Sph.)	Korak	Dioptrija cilindra (D Cyl.)	Osa
8,90	-0,00 do -6,00	0,25	-1,00 i -1,75	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
			-2,50	10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170, 180
	+0,25 do +4,00	0,25	-1,00 i -1,75	10, 20, 70, 80, 90, 100, 110, 160, 170, 180

Postojećim korisnicima Focus Visitint i Focus Toric sočiva savetovati da konsultuju svog oftalmologa i pređu na zdravija i komfornija silikon hidrogel kontaktna sočiva iz familije AIR OPTIX


KOZMETIČKA SOČIVA / KONTAKTNA SOČIVA U BOJI - FRESHLOOK -



Većina ljudi na svetu ima tamnu boju očiju, a po istraživanjima među populacijom starosne dobi od 15 do 55 godina, oko 85% osoba zainteresovano je da bar ponekad promeni svoju boju oka i to najčešće u plavu ili zelenu boju. Današnja tehnologija omogućuje različite načine promene boje oka, bez obzira na prirodnu boju oka. Moguće je boju promeniti izrazito, umereno, ili je samo naglasiti. Sočiva koja izrazito

menjaju boju oka izrađena su tako da obojeni deo sočiva u potpunosti prekriva prirodnu boju irisa, dok sočiva koja boju menjaju umerenije imaju tačkasti nanos boje tako da se prirodna boja oka blago nazire tj. providi, što pruža fantastičan efekat i izražajnost. **CIBA VISION** proizvodi najprodavanija i najpopularnija sočiva u boji na svetu: **FRESHLOOK** sočiva koja osim što menjaju boju oka na željeni način, imaju i ugrađen UV filter koji štiti oči od štetnog UV zračenja. **FRESHLOOK** sočiva u boji mogu se nositi bez obzira da li je pacijentu potrebna korekcija vida ili ne (dostupna su i sa i bez dioptrije). Postoji nekoliko vrsta **FRESHLOOK** sočiva zavisno od načina promene boje oka i željenog efekta:


- **FRESHLOOK COLORBLEND**S (za prirodnu promenu boje tamnih očiju)
- **FRESHLOOK COLOR**S (za izrazitu promenu boje tamnih očiju)
- **FRESHLOOK DIMENSION**S (za promenu boje prirodno svetlih očiju)

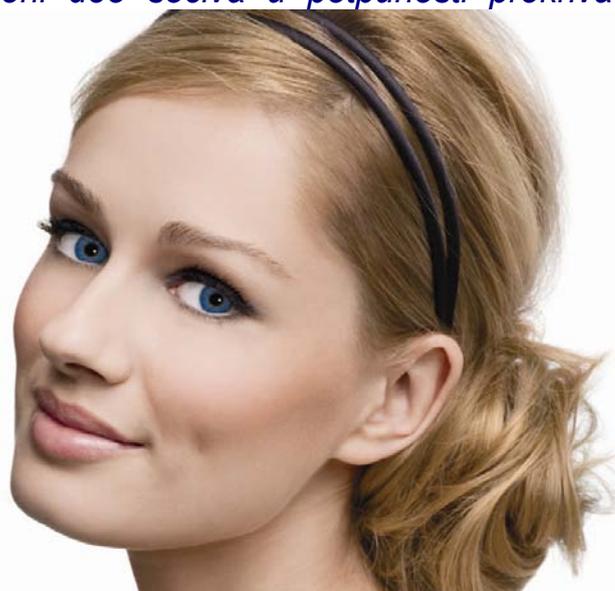

Najpopularnije boje FRESHLOOK sočiva u boji su sve nijanse plave, zelene, tirkizne, ljubičaste i sive boje.

FRESHLOOK KONTAKTNA SOČIVA U BOJI nude paletu od 21 boje i efekta bez obzira da li je pacijentu potrebna korekcija vida ili ne.

FRESHLOOK su kozmetička sočiva za svaki dan ili za specijalne prilike.

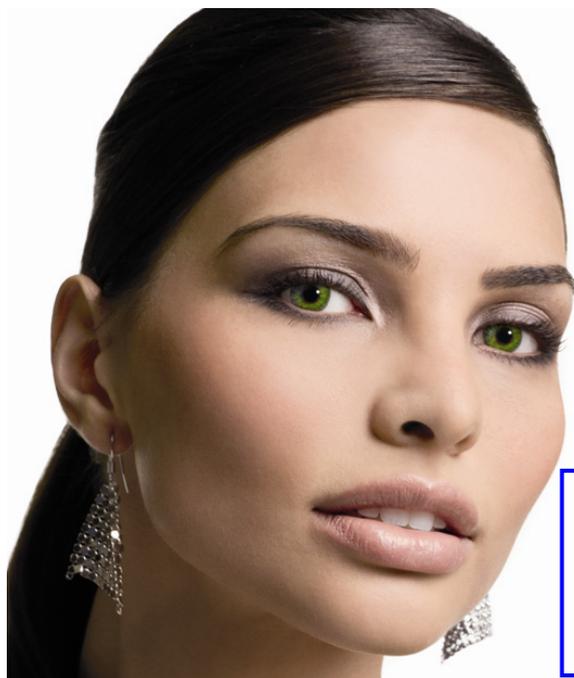

SAVET: Obavezno napomenuti pacijentu da boju **FRESHLOOK** sočiva uvek bira na osnovu **FRESHLOOK** probnog seta. Boje iz kataloga su samo za približan odabir! Jedino pomoću probnog seta, pacijent može videti kako će njemu lično izgledati efekat promene boje oka.

1. FRESHLOOK COLORBLEND (FB2)



**FRESHLOOK COLOR BLENDS SU
NAJPRODAVANJA KONTAKTNA SOČIVA
U BOJI NA SVETU!
ZA PRIRODNU PROMENU BOJE TAMNIH OČIJU.
Čine oko izražajnijim, većim i lepšim.**

- Zamena: mesečna (ukoliko se nose svaki dan) ili na tri meseca, (ukoliko se nose samo povremeno ili u kombinaciji sa nekom drugom vrstom optičkog pomagala)
- Režim nošenja: dnevno nošenje (ujutru se postavljaju, a uveče skidaju)
- Vlažnost: 55%, Dijametar: 14,5 mm
- SADRŽE UV FILTER
- Kompanija CIBA VISION, vodeći proizvođač kontaktnih sočiva, patentirala je posebnu tehnologiju izrade FRESHLOOK COLORBLEND sočiva koja daju 3D efekat promene boje oka. Kombinovanjem svetlijih i tamnijih transparentnih nijansi određene boje u više slojeva i zrakasto u odnosu na zenicu, dobija se efekat koji istovremeno daje i promenu boje oka, ali i veoma prirodan izgled.
- Spoljašnji prsten, kojim je ovičen obojeni deo, čini oko većim, a pogled izražajnijim. FRESHLOOK COLORBLEND omogućuju da svaki korisnik postigne jedinstvenu tj. personalizovanu boju oka, jer je prirodna boja oka korisnika podloga za efekat koji pružaju sočiva.
- Najveća i najlepša paleta boja među svim sočivima u boji
- Pakovanje: kutija od dva blistera (sočiva)
- Preporuka za održavanje: SoloCare Aqua ili AOSEPT PLUS
- Raspon raspoloživih efekata/boja i parametara:



Dostupne boje	Bazna Krivina	Dioptriya	Korak
Gemstone Green Brilliant Blue Sterling Gray True Sapphire Blue Green Turquoise Amethyst Gray Brown Honey Pure Hazel	8,60	+2,00 do -6,00	0,25
		+2,00 do +6,00 -6,00 do -8,00	0,50



2. FRESHLOOK COLORS (FC2)



Namena: ZA INTENZIVNU PROMENU BOJE TAMNIH OČJU. Naglašen efekat promene boje.

- Zamena: mesečna (ukoliko se nose svaki dan) ili na tri meseca, (ukoliko se nose samo povremeno ili u kombinaciji sa nekom drugom vrstom optičkog pomagala)
- Režim nošenja: dnevno nošenje (ujutru se postavljaju, a uveče skidaju)
- Vlažnost: 55%, Dijametar: 14,5 mm
- SADRŽE UV FILTER
- Pakovanje: kutija od dva blistera (sočiva)
- Preporuka za održavanje: SoloCare Aqua ili AOSEPT PLUS
- Raspon raspoloživih parametara:

Dostupne boje	Bazna Krivina	Dioptriya	Korak
Blue Green Violet Misty gray	8,60	+2,00 do -6,00	0,25
		+2,00 do +6,00 -6,00 do -8,00	0,50

Boje:

Blue



Violet



Green



Misty gray



3. FRESHLOOK DIMENSIONS (FD2 i FD6)



Namena: ZA INTENZIVNU PROMENU BOJE PRIRODNO SVETLIH OČJU. Naglašen efekat promene boje.

- Zamena: mesečna (ukoliko se nose svaki dan) ili na tri meseca, (ukoliko se nose samo povremeno ili u kombinaciji sa nekom drugom vrstom optičkog pomagala)
- Režim nošenja: dnevno nošenje (ujutru se postavljaju, a uveče skidaju)
- Vlažnost: 55%, Dijametar: 14,5 mm
- SADRŽE UV FILTER
- Pakovanje: kutija od 2 ili kutija od 6 blistera (sočiva)
- Preporuka za održavanje: SoloCare Aqua ili AOSEPT PLUS
- Raspon raspoloživih parametara:

Dostupni efekti / boje	Bazna Krivina	Dioptriya	Korak
Pacific Blue Caribbean Aqua Sea Green	8,60	+2,00 do -6,00	0,25
		+2,00 do +6,00 -6,00 do -8,00	0,50

Raspoložive boje:

Sea Green



Pacific Blue



Caribbean Aqua



TEČNOSTI ZA ODRŽAVANJE KONTAKTNIH SOČIVA

Kontaktne sočiva su veoma popularno i rasprostranjeno sredstvo za korekciju vida. U odnosu na druga optička pomagala ona pružaju neprevaziđen kvalitet vida, slobodu i komfor. Međutim, kontaktne sočiva se moraju pravilno, redovno i brižljivo održavati odgovarajućim sredstvima za tu namenu. Pravilno održavanje kontaktnih sočiva veoma je važno, jer u suprotnom može doći do pojave ozbiljnih infekcija i komplikacija. Lekar oftalmolog je dužan da skrene pažnju pacijentu na ovu činjenicu, te da mu pruži sve informacije vezane za pravilan izbor odgovarajućeg sredstva za održavanje, pravilno rukovanje sočivima i pravilno održavanje kontaktnih sočiva izabranim sredstvom. Koliko je važan pravilan izbor sredstva za održavanje kontaktnih sočiva, toliko je važno i da se pacijent pridržava uputstava proizvođača izabranog sredstva tj. da ga koristi na pravilan način. Jedino na taj način pacijent će imati potpuno zdravlje, dobar vid i komfor.

Tokom nošenja, kontaktne sočiva bivaju izložena:

- spoljnim uticajima (prašina, čestice, nečistoće...)
- mikrobima (bakterije, gljivice, virusi)
- materijama koje ulaze u sastav suza (proteini, lipidi, mucini)

Brojni proizvođači širom sveta nude veliki broj različitih sredstava za održavanje kontaktnih sočiva. Mehanizam delovanja ovih sredstava je hemijski i zavistan od tipa aktivne supstance koja se koristi.

Bez obzira na sam mehanizam delovanja, važno je da sredstva:

- zadovolje svoju osnovnu namenu (čišćenje, ispiranje, dezinfekcija, uklanjanje depozita),
- zadovolje aspekt biokompatibilnosti,
- pruže korisniku dugotrajni efekat čišćenja
- omoguće dugotrajni komfor pri nošenju (dovoljno vlažnosti, smanjenje trenja, i sl.),
- ne sadrže štetne konzervanse

Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva mogu biti:

1. VIŠENAMENSKA (po sistemu "sve u jednom" tj. jedno sredstvo koje istovremeno čisti, ispira, dezinfikuje, čuva, vlaži i uklanja depozite)
2. Sastavljena od više sredstava, pri čemu svaki ima svoju namenu



**Kompanija CIBA VISION
je jedan od vodećih
proizvođača sredstava
za održavanje mekih
kontaktnih sočiva!**

PONUĐA TEČNOSTI ZA ODRŽAVANJE KONTAKTNIH SOČIVA


NAZIV	PROIZVOĐAČ	OPIS	PAKOVANJE
SOLOCARE AQUA		Sredstvo za održavanje mekih kontaktnih sočiva najnovije generacije. Dezinfikuje, otklanja depozite, vlaži, i čuva kontaktna sočiva. Sadrži HYDROLOCK efekat, koji uz dodatak provitamina, održava sočiva i oči vlažnim tokom celog dana. Prodaje se uz specijalnu ANTIMIKROBNU KASETICU sa jonima srebra. Ne sadrži konzervanse.	360 ml
AOSEPT PLUS		Sredstvo za održavanje kontaktnih sočiva na bazi vodonik peroksida. Moćan u dezinfekciji, otklanja depozite, vlaži, i čuva kontaktna sočiva. Izuzetno efikasan protiv bakterija, gljivica i virusa. Ne sadrži konzervanse. U pakovanju je specijalna kasetica sa katalizatorom.	360 ml
ALL IN ONE LIGHT		Višenamensko sredstvo za održavanje mekih kontaktnih sočiva po sistemu „Sve u Jednom“. Vršiti dezinfekciju, čišćenje, ispiranje, vlaženje i čuvanje sočiva. U pakovanju je i kasetica za čuvanje sočiva.	380 ml
OPTI FREE EXPRESS		Višenamensko sredstvo za održavanje mekih kontaktnih sočiva po sistemu „Sve u Jednom“. Vršiti dezinfekciju, čišćenje, ispiranje, vlaženje i čuvanje sočiva. U pakovanju je i kasetica za čuvanje sočiva.	355 ml
DELTA CLEANER		Sredstvo za čišćenje GP i PMMA kontaktnih sočiva. Ne sadrži konzervanse. Nije abrazivan. Sadrži moćne surfaktante koji omogućuju izuzetno čišćenje.	20 ml
DELTA PLUS		Sredstvo za dezinfekciju, čuvanje i vlaženje GP sočiva. Kao aktivnu supstancu sadrži Poliheksanid, što omogućuje izuzetan kvalitet dezinfekcije. Sadrži agense za vlaženje.	110 ml
AQUIFY		Kapi za postizanje dugotrajnog komfora. Formiraju film koji štiti rožnjaču i sprečava trenje između rožnjače i sočiva, i između sočiva i kapaka. Ne sadrže konzervanse, te su izuzetno pogodne za nosioce svih vrsta kontaktnih sočiva, ali i kod osoba koje ne nose kontaktna sočiva, a imaju sindrom „suvog oka“.	10 ml
REFRESH CONTACTS		Kapi za trenutno ublažavanje tegoba kod umornih, suvih očiju i pružanje dugotrajne udobnosti tokom nošenja svih vrsta kontaktnih sočiva. Jedinstvena formulacija uklanja suvoću i nadražaj očiju uzrokovan prašinom, zaslepljujućim svetlom, polenom, zagađenjem vazduha ili dugotrajnim radom.	15 ml
TRIZYME Enzimske tablete		Preparat za dodatno čišćenje i deproteinizaciju mekih i GP kontaktnih sočiva. Uspešno uklanjaju proteine, lipide (ulja, voskovi), mucine i kalcijumske depozite	12 tabs

ZA BEZBEDNOST, ZDRAVLJE I KOMFOR PACIJANTA OD IZUZETNOG JE ZNAČAJA DA SE KONTAKTNA SOČIVA ODRŽAVAJU NA PRAVILAN NAČIN, VISOKOKVALITETNIM, REGISTROVANIM SREDSTVIMA PROVERENIH I U SVETU RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA

TABLICA ZA KONVERZIJU DIOPTRIJE

dioptrija	mm										
36,00	9,375	39,37	8,572	42,75	7,894	46,12	7,317	49,50	6,818	52,87	6,383
36,12	9,343	39,50	8,544	42,87	7,872	46,25	7,297	49,62	6,801	53,00	6,367
36,25	9,310	39,62	8,518	43,00	7,848	46,37	7,278	49,75	6,783	53,12	6,353
36,37	9,279	39,75	8,490	43,12	7,826	46,50	7,258	49,87	6,767	53,25	6,338
36,50	9,246	39,87	8,465	43,25	7,803	46,62	7,239	50,00	6,750	53,37	6,323
36,62	9,216	40,00	8,437	43,37	7,781	46,75	7,219	50,12	6,733	53,50	6,308
36,75	9,183	40,12	8,412	43,50	7,758	46,87	7,200	50,25	6,716	53,62	6,294
36,87	9,153	40,25	8,385	43,62	7,737	47,00	7,180	50,37	6,700	53,75	6,279
37,00	9,121	40,37	8,360	43,75	7,714	47,12	7,162	50,50	6,683	53,87	6,265
37,12	9,092	40,50	8,333	43,87	7,693	47,25	7,142	50,62	6,667	54,00	6,250
37,25	9,060	40,62	8,308	44,00	7,670	47,37	7,124	50,75	6,650	54,12	6,236
37,37	9,031	40,75	8,282	44,12	7,649	47,50	7,105	50,87	6,634	54,25	6,221
37,50	9,000	40,87	8,257	44,25	7,627	47,62	7,087	51,00	6,617	54,37	6,207
37,62	8,971	41,00	8,231	44,37	7,606	47,75	7,068	51,12	6,602	54,50	6,192
37,75	8,940	41,12	8,207	44,50	7,584	47,87	7,050	51,25	6,585	54,62	6,179
37,87	8,912	41,25	8,181	44,62	7,563	48,00	7,031	51,37	6,569	54,75	6,164
38,00	8,881	41,37	8,158	44,75	7,541	48,12	7,013	51,50	6,553	54,87	6,150
38,12	8,853	41,50	8,132	44,87	7,521	48,25	6,994	51,62	6,538	55,00	6,136
38,25	8,823	41,62	8,109	45,00	7,500	48,37	6,977	51,75	6,521	55,12	6,123
38,37	8,795	41,75	8,083	45,12	7,480	48,50	6,958	51,87	6,506	55,25	6,108
38,50	8,766	41,87	8,050	45,25	7,458	48,62	6,941	52,00	6,490	55,37	6,095
38,62	8,738	42,00	8,035	45,37	7,438	48,75	6,923	52,12	6,475	55,50	6,081
38,75	8,708	42,12	8,012	45,50	7,417	48,87	6,906	52,25	6,459	55,62	6,068
38,87	8,682	42,25	7,988	45,62	7,398	49,00	6,887	52,37	6,444	55,75	6,054
39,00	8,653	42,37	7,965	45,75	7,377	49,12	6,870	52,50	6,428	55,87	6,041
39,12	8,627	42,50	7,941	45,87	7,357	49,25	6,852	52,62	6,413	56,00	6,027
39,25	8,598	42,62	7,918	46,00	7,336	49,37	6,836	52,75	6,398		

DELATNOSTI I KONTAKTI

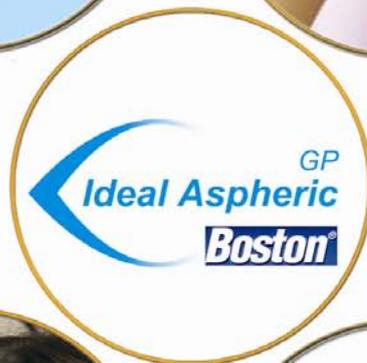

SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU
Bul. Mihaila Pupina 10v, YBC, I sprat, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 311 91 76 i +381 11 311 91 77

VELEPRODAJE:

**KONTAKTNA SOČIVA, TEČNOSTI ZA ODRŽAVANJE
I OFTALMOLOŠKI HIRURŠKI MATERIJAL**
Trg Nikole Pašića 1/I, Tel: 011/2920777, Fax: 011/2184678

LEKOVI, MEDICINSKA SREDSTVA I DIJETETSKI SUPLEMENTI
Skender-begova 1a, Tel: 011/2030606, 2030607

DIOPTRIJSKA STAKLA
Vele Nigrinove 1a, Tel: 011/2835205, 2835240

DIOPTRIJSKE I SUNČANE NAOČARE
Vele Nigrinove 1a, Tel: 011/2836501

OFTALMOLOŠKI I OPTIČKI APARATI
Knez Mihailova 6/IV, Tel: 011/2182192, 2182970

SLUŠNI APARATI
Knez Mihailova 6/IV, Tel: 011/3037676, 2184445

